

dailyscope

La vidéo-otoscopie au quotidien



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ



PHOTO



VIDÉO



ENREGISTREMENT



Mobile et autonome, ne demande aucune installation particulière et aucune formation. Encore plus simple qu'un PC (pas d'interface informatique) il intègre toutes les caractéristiques d'un module d'endoscopie rigide.



La qualité d'**image HD**, répond au standard de ce jour avec une sortie HDMI et VGA permettant de brancher un écran déporté.



Ergonomique, grâce aux commandes placées sur la tête de caméra permettant le gel d'image, l'enregistrement vidéo et le zoom.

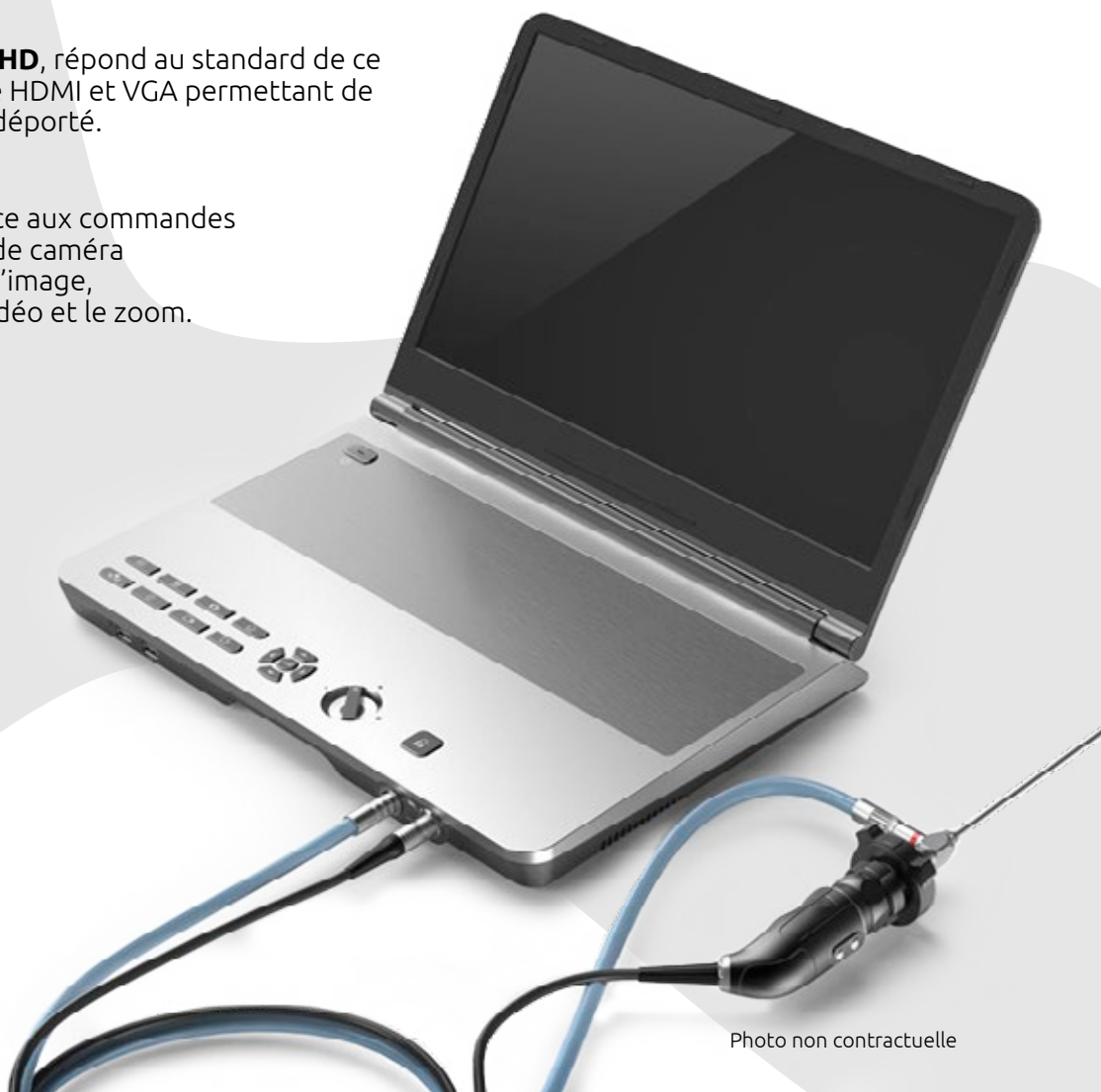


Photo non contractuelle

Résolution	1920(H) x 1080 (V) 60 frame
Taille de l'écran	17.3", qualité d'écran HD
Format photo	JPG
Format vidéo	MP4
Taille du produit	413 mm (longueur) x 291 mm (largeur) x 40 mm (épaisseur)
Poids du produit	4 KG
Longueur des câbles	3 m

Utilisation

Ce produit destiné à être utilisé principalement en consultation et répondre à la visualisation de la sphère ORL sur animal vigile, peut également convenir pour différents actes d'endoscopie : rhinoscopie, bronchoscopie, laparoscopie, arthroscopie, etc.

Inclus

L'Otoscope


Convient pour toute la sphère ORL

- ✓ 1 Optique long 80mm diam 5,0mm Canal 1,8mm
- ✓ 1 Robinet 2 voies pour irrigation / aspiration et passage de pince.
- ✓ 1 Ecouvillon



Pince à biopsie

Longueur : de 280 à 340 mm
Diamètre : 1,6 mm
2 mors mobiles

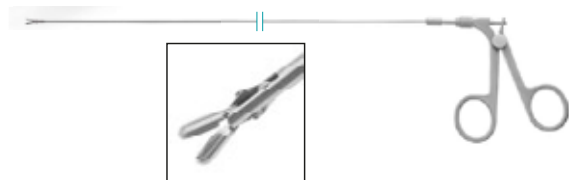

Pince à corps étranger

Longueur : de 280 à 340 mm
Diamètre : 1,6 mm
2 mors mobiles



Le support mural

Support mural bras articulé pivotant. Livré avec support mural otoscope.

Démontage facile.



Le chariot

Colonne réglable en hauteur avec tablette, support otoscope et chargeur intégré.

Démontage facile.



En option