


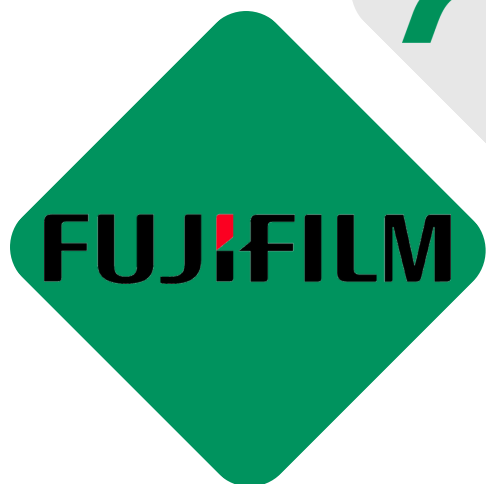

CATALOGUE

ENDOSCOPIE

VÉTÉRINAIRE

2026

Le catalogue de nos solutions
d'endoscopie vétérinaire



Bienvenue chez Fujifilm Vet Systems, votre fabricant en endoscopie vétérinaire

Fujifilm est **un des acteurs historiques** du marché endoscopique et aujourd'hui un des principaux acteurs de ce domaine tant sur le plan du **nombre de structures installées**, que **d'innovation apportées** ou de **proposition 360°** (souple ou rigide, processeur, type d'endoscopie, accessoires ...). Nous pouvons répondre en **coelioscopie**, **laparoscopie**, **arthroscopie**, **gastrosopie**, **rhinoscopie...**

Nous sommes également **le partenaire de l'AFVAC** sur l'ensemble des formations menées également en collaboration avec **l'Ecole de Chirurgie de Nancy et Velvet Innovative**.



ELUXEO Lite



Travaillez avec précision, clarté et sécurité!

Endoscopie souple

Fabricant historique en endoscopie digestive et bronchique, Fujifilm est un des leaders mondiaux en endoscopie.

Innovants et robustes, nos matériels d'endoscopie permettent un examen précis, fiable et sécurisé.



Processeur EP6000

Le **processeur et source de lumière deux-en-un** capable d'accueillir les générations d'endoscope des séries 5 à 7.



EB-530S Standard Bronchoscope

Des images **haute qualité** et une **manipulation améliorée**



EB-530P Ultraslim Bronchoscope

Le bronchoscope pédiatrique avec une extrémité de **3,8mm**



EC-740 T/M Slim colonoscope

Le colonoscope **fin**, idéal pour les anatomies ou les **examens complexes**.



EG-720R Gastroscope

Le gastroscopie de routine **fiable et efficace**.



EG-740N Gastroscope Slim

Le naso-gastroscopie avec une largeur distale de **5,8mm**.

Bronchoscope

Model	Observation range (mm)	Field of view	Ø Distal end (mm)	Ø Insertion tube (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Bending capability (up/down)	Working length (mm)	Image area, instrument entry	Remarks
EB-530P	3-100	120°	3.8	3.8	1.2	180°/130°	600		HF-compatible LASER blocking filters (*2)
EB-530S	3-100	120°	4.9	4.9	2.0	180°/130°	600		HF-compatible LASER blocking filters (*2)

Gastroscope

Model	Observation range (mm)	Field of view	Ø Distal end (mm)	Ø Insertion tube (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Bending capability (up/down)	Bending capability (left/right)	Working length (mm)	Image area, instrument & water jet entry	Remarks
EG-740N	3-100	140°	5.8	5.9	2.4	210°/90°	100°/100°	1,100		LCI, BLI, ACI
ELUXEO Lite EG-720R	2-100	140°	9.2	9.3	2.8	210°/90°	100°/100°	1,100		LCI, BLI

Colonoscope

EC-740T/M, L	3-100	140°	9.8	10.7	3.2	210°/160°	160°/160°	1,330/1,690		LCI, BLI, ACI Water jet
--------------	-------	------	-----	------	-----	-----------	-----------	-------------	--	-------------------------



Le dailyscope

Aussi grand qu'un PC, le **Dailyscope** peut répondre à la **visualisation de la sphère ORL** sur animal vigile, mais aussi permettre d'autres actes d'endoscopie : **rhinoscopie, bronchoscopie, laparoscopie et arthroscopie.**

Mobile et autonome, aucune installation particulière et aucune formation, il est **plus simple qu'un PC** (pas d'interface informatique) et intègre **toutes les caractéristiques d'un module d'endoscopie rigide.**

La **qualité d'image full HD**, répond au standard de ce jour avec une **sortie HDMI et VGA** permettant de brancher un écran déporté ainsi qu'une prise ethernet pour se connecter au réseau.

Ergonomique, grâce aux commandes placées sur la tête de caméra permettant le **gel d'image, l'enregistrement vidéo et le zoom** vous pouvez suivre la **progression des pathologies.**

Simple d'utilisation et conçu pour une utilisation quotidienne **en consultation**, pour l'examen et le retrait des corps étrangers sur animal vigile.



Endoscopie rigide

Afin de proposer un **choix 360°** à ses clients, **FujiVet** a développé un **partenariat** avec une **entreprise française pionnière dans l'endoscopie vétérinaire**, 4D Innovation.



Le Smartscope Hdmi

Tout est dans la poignée!

Pour **tout examen endoscopique Compatible** avec **toutes** les marques d'endoscopes rigides



Connexion HDMI sur TV ou moniteur



La qualité d'image 4K, répond au standard ECVS de ce jour.



Ergonomique, grâce aux commandes placées sur la tête de caméra permettant le **gel d'image, l'enregistrement vidéo.**



Le système est doté d'une source lumineuse LED compatible avec tous modèles d'endoscopes.



Résolution 4K	HDMI 3840(H) x 2160
Sortie vidéo	HDMI
Longueur du câble	2,8m
Taille du produit	112 x 48 x 48 mm
Poids du produit	394 g
Puissance	Max 5V 2A

Le Smartscope Wifi



Tout est dans la poignée et sans fil!

Pour tout examen endoscopique
Compatible avec toutes marques
d'endoscopes rigides



Connexion HDMI sur TV ou moniteur



Simple à connecter sur smartphone ou
tablette (Android et IOS).



Ergonomique, grâce aux commandes
placées sur la tête de caméra
permettant le gel d'image,
l'enregistrement vidéo.



Le système est doté d'une source
lumineuse LED compatible avec tous
modèles d'endoscopes.



L'application disponible pour Android et
IOS, permet d'**identifier l'animal** et les
propriétaires, d'identifier le vétérinaire,
de prendre des **photos et vidéos**, de les
archiver et d'**éditer un rapport d'examen**
en pdf.


Endoscopie rigide

Tous les accessoires



Afin de renforcer
l'**ergonomie de vos salles
de travail**, nous pouvons
également vous proposer
un **support mural avec
bras articulé pivotant**.
Livré avec support mural
otoscope. Montage facile.

Ou un **chariot avec colonne
réglable en hauteur, tablette,
support otoscope et chargeur
intégré. Montage facile.**

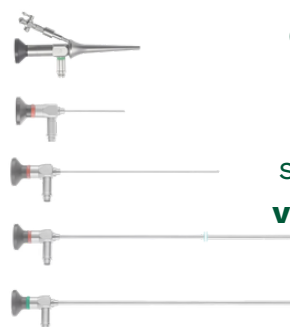

Otoscope, rhinoscope,
laparoscope,
coelioscope... Nous
sommes en mesure de
**vous fournir quasi tous
les endoscopes
souhaités.**

Vous trouverez également **les pince à
corps étranger et les pinces à biopsie**
associées, et autres accessoires
interventionnels.



Résolution	1080P (1920x1080) @ 30fps
Wifi	Mode AP 5G
Autonomie de la batterie	max. 5h
Temps de charge	6h
Format vidéo	AVI / MP4



Endothérapie

Depuis **1998**, **Medwork** développe et **fabrique** des instruments de technologie médicale pour l'endoscopie thérapeutique. **Les accessoires de haute qualité** pour les endoscopes flexibles sont des **produits de qualité allemande**, sourcés et fabriqués en Allemagne. Fujifilm rachète alors Medwork en 2020 pour avoir une **proposition 360° en endoscopie**.

CORPS ETRANGER

Product code	Material code	Characteristics	Volume net (cm³)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
OCTOPUS FOREIGN BODY RETRIEVAL NET*2 ②						
FOR1-N1-20-180	70100146681	Hexagonal, framed, paediatric	3	1,800	2.0	5
FOR1-N1-30-220	70100146563	Oval, framed	6	2,200	2.8	5
FOR1-N1-40-220	70100146682	Reservoir function, framed	8	2,200	2.8	5
FOR1-N2-30-220	70100146654	Kite, framed	6	2,200	2.8	5
FOR1-N3-30-220	70100146607	Kite, framed, rotatable	6	2,200	2.8	5

Product code	Material code	Characteristics	Opening width (mm)	Ø Tube (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
FOREIGN BODY FORCEPS ②							
FOR1-A1-23-230*2	70100146637	Alligator, metal spring, coated	9	2.3	2,300	2.8	5
FOR1-A2-23-230*2	70100146653	Hybrid jaw configuration alligator/rat tooth, metal spring, coated	9	2.3	2,300	2.8	10
FOR1-A2-23-260*2	70100146565	Hybrid jaw configuration alligator/rat tooth, metal spring, coated balloon enteroscopy	8	2.3	2,600	2.8	5
FOR1-P1-18-230*2	70100146585	Pelican, coated, paediatric	9	1.8	2,300	2.0	5
FOR1-P1-23-230*2	70100146638	Pelican, coated	15.5	2.3	2,300	2.8	5
FOR1-H3-23-230*2	70100146566	Three-arm grasping forceps, PTFE catheter		2.3	2,300	2.8	5

BIOPSIE

Product code	Material code	Characteristics	Ø Jaws (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
ENDOBIITE2 BIOPSY FORCEPS*1 ②						
BIO1-C4-18-180	70100146647	Oval jaws, coated, paediatric	1.8	1,800	2.0	10
BIO1-C4-18-260	70100146662	Oval jaws, coated, balloon enteroscopy	1.8	2,600	2.0	10
BIO1-C4-23-180	70100146574	Oval jaws, mono pull wire, coated	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-C4-23-230	70100146678	Oval jaws, mono pull wire, coated	2.3	2,300	2.8	10
BIO1-D4-23-180	70100146552	Oval jaws, mono pull wire, coated, spike	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-D4-23-230	70100146593	Oval jaws, mono pull wire, coated, spike	2.3	2,300	2.8	10
BIO1-C3-23-180	70100146705	Oval jaws, mono pull wire	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-C3-23-230	70100146591	Oval jaws, mono pull wire	2.3	2,300	2.8	10
BIO1-D3-23-180	70100146645	Oval jaws, mono pull wire, spike	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-D3-23-230	70100146592	Oval jaws, mono pull wire, spike	2.3	2,300	2.8	10
BIO1-G4-23-180	70100146575	Alligator, mono pull wire, coated	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-G4-23-230	70100146557	Alligator, mono pull wire, coated	2.3	2,300	2.8	10
BIO1-H4-23-180	70100146679	Alligator, mono pull wire, coated, spike	2.3	1,800	2.8	10
BIO1-H4-23-230	70100149148	Alligator, mono pull wire, coated, spike	2.3	2,300	2.8	10

EXTRACTION CALCULS BILIAIRES/ LITHOTRIPSIE

Product code	Material code	Characteristics	Ø Balloon (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
STONE EXTRACTION BASKET*1 ②						
BAS1-A2-30-23-200	70100146661	Hexagonal	30	2,000	2.8	5
BAS1-C1-20-18-260	70100146573	Half twisted, balloon enteroscopy, not suitable for lithotripsy	20	2,600	2.0	2
Product code	Material code	Characteristics	Ø Basket (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
LIT1-C3-30-23-200	70100146986	Half twisted	30	2,000 / 4,000	2.8	2

POLYPECTOMIE

FUJIFILM

Product code	Material code	Characteristics	Ø Snare (mm)	Ø Snare wire (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
POL1-B1-10-23-220-OL	70100146684	Convex, CWT	10	0.39	2,200	2.8	10
POL1-B3-30-23-220-OL	70100146686	Oval, rotatable, monofil	30	0.25	2,200	2.8	10

DILATATION

FUJIFILM

Product code	Material code	Ø Balloon (mm)	Length balloon (mm)	Accepted guide wire (in ≥ mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
DILATION BALLOON*1 ②						
(Working length 2,300 mm, 2 radiopaque markings, tapered catheter 2.3/1.8 mm, for short and long wire technique)						
DIL1-A1-06-40-23-35	70100146636	6	40	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-08-40-23-35	70100146669	8	40	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-10-40-23-35	70100146663	10	40	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-12-60-23-35	70100146605	12	60	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-14-60-23-35	70100146664	14	60	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-16-60-23-35	70100146670	16	60	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-18-60-23-35	70100146667	18	60	.035 ≥ 2,000	2.8	2
DIL1-A1-20-60-23-35	70100146606	20	60	.035 ≥ 2,000	3.2	2
Product code	Material code	Characteristics				Unit

INSUFFLATION DEVICE*1

DIL1-B1-60	70100146584	60 ml volume, 12 atm maximum pressure, compatible with Dilation Balloons DIL1 range					1
------------	-------------	---	--	--	--	--	---

BROSSES CYTOLOGIE

Product code	Material code	Characteristics	Ø Brush (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
CYTOLOGY BRUSH ②						
VDK-BC-18-120-B*1	70100164726	U-shaped brush, coated	2.0	1,200	2.0	10
VDK-BC-18-120-C-2*1	70100164723	Straight shaped brush, coated	2.0	1,200	2.0	10
WS0372512*2	70100146960	Handle, 1 lumen, distal protection ball	2.5	1,200	2.0	5

CAPUCHON D'EXTRACTION

Product code	Material code	Characteristics	Unit
FOREIGN BODY PROTECTION CAP*3			
WS0420000	70100146961	Foreign body protection cap	10

CATHETER

Product code	Material code	Characteristics	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
LAVAGE CATHETER*1					
SPE1-B5-18-120	70100146790	LL-connector	1,200	2.0	5
SPE1-B5-21-120	70100146822	LL-connector	1,200	2.8	5

ÉCOUVILLONS

Product code	Material code	Characteristics	Ø Brush (mm)	Length (mm)	Ø Instrument channel (mm)	Unit
RACoon BRUSH CLEANING BRUSHES*1 ②						
CLE1-G1-50-18-180	70100146651	For gastroscope, 1 brush	5	1,800	≥ 2.0	50
CLE1-G2-50-18-180	70100146644	For gastroscope, 2 brushes	5	1,800	≥ 2.0	50
CLE1-C2-50-18-230	70100146582	For colonoscope, 2 brushes	5	2,300	≥ 2.0	50

PROTECTION ENDOSCOPE

Product code	Material code	Characteristics	Ø Inner (mm)	Ø Outer (mm)	Length (mm)	Unit
SHEPHERD ENDOSCOPE PROTECTOR*1 ②						
SHP1-U1	70100147808	Endoscope protector in red, white, blue, green	4-10	37	140	50

L'Endoscopie chez Fujivet

*Parcequ'il y a quand même plus
simple
pour regarder dans un patient*



Contact

Téléphone: +33 (0)4 72 42 32 42

Email: accueil_fvsf@fujifilm.com

Adresse: ZA La Croix des Hormes,
69250 MONTANAY